

MiniMix® 100

Complementary products for 100 mL lab blender

Produits complémentaires pour le malaxeur 100 mL



Blender bags *Sacs pour malaxeurs*




Lab accessories *Accessoires de laboratoire*



interscience

Blender bags

Sacs pour malaxeurs

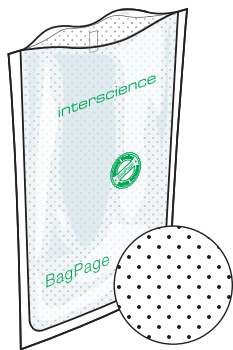

BagPage® Full-page filter bags / Sacs-filtre pleine page

► For pasty samples / Pour échantillons pateux

Reference/Référence	121 025
Max blending volume <i>Volume max pour le malaxage</i>	100 mL
Optimal blending volume <i>Volume optimal pour le malaxage</i>	5 - 50 mL
Bag dimensions <i>Dimensions du sac</i>	95 x 180 mm
Filter porosity <i>Porosité du filtre</i>	280 µ



BagLight® PolySilk® Blender bags / Sacs pour malaxeurs

Reference/Référence	131 025
Max blending volume <i>Volume max pour le malaxage</i>	100 mL
Optimal blending volume <i>Volume optimal pour le malaxage</i>	5 - 50 mL
Bag dimensions <i>Dimensions du sac</i>	110 x 200 mm



Products made for INTERSCIENCE by Interlab, an ISO 9001 certified company.
Produits fabriqués pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001.



Why use a filter bag?


Pourquoi utiliser un sac-filtre ?



Standard bag Sac standard

No filtration / Pas de filtration

Blocked pipet
Pipette bouchée
Sample mixed
with microorganisms
Échantillon +
micro-organismes :
à décanter

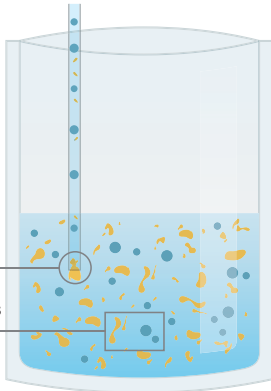


- Diluted and blended sample particles
Particules d'échantillon diluées et malaxées dans le sac
- Microorganisms to be analyzed
Micro-organismes à analyser

After plating and incubation
Après ensemencement et incubation



Debris or colonies?
Débris ou colonies ?

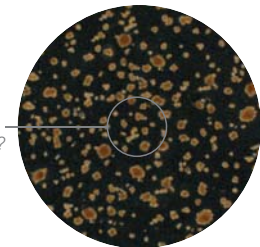

**Time-consuming
and inaccurate results**

**Perte de temps
et résultats imparfaits**




Filter bag Sac-filtre



Instant filtration / Filtration instantanée

Easy pipetting
Pipetage facile
Filtered and separated
sample and
microorganisms
*Micro-organismes
et échantillon
filtrés et séparés*

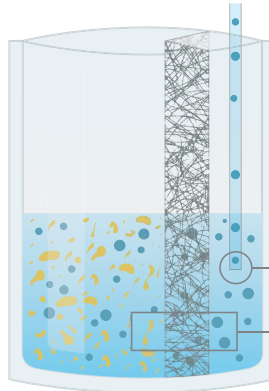


- Diluted and blended sample particles
Particules d'échantillon diluées et malaxées dans le sac
- Microorganisms to be analyzed
Micro-organismes à analyser
- Filter/Filtre

After plating and incubation
Après ensemencement et incubation



Only colonies!
Uniquement des colonies !

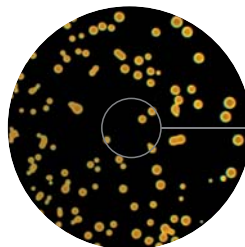

**Optimized process
and accurate results**

**Manipulation optimisée
et précision des résultats**

BagTools® Lab accessories / Accessoires



BagOpen® 80/100

80/100 mL bag opener/holder
Easy opening, extremely stable.

*Portoir ouvre-sac 80/100 mL
Ouverture facile, très stable.*

Ref. 211 010



BagClip® 80/100

Closing clip
Water- and air-tight. Closes any kind of bag.

*Barette de fermeture
Pour une étanchéité aux gaz et aux liquides.*

Ref. 231 010



BagRack® 80/100

80/100 mL bags storage rack
Clean and methodical storage of bags.

*Portoir de sacs 80/100 mL
Rangement méthodique et propre.*

Ref. 221 010

Contact us for **Infos | Videos | Demos | Quote**

INTERNATIONAL info@interscience.com
USA & CANADA sales.usa@interscience.com
CHINA sales.china@interscience.com
SOUTH-EAST ASIA sales.asia@interscience.com

www.interscience.com